
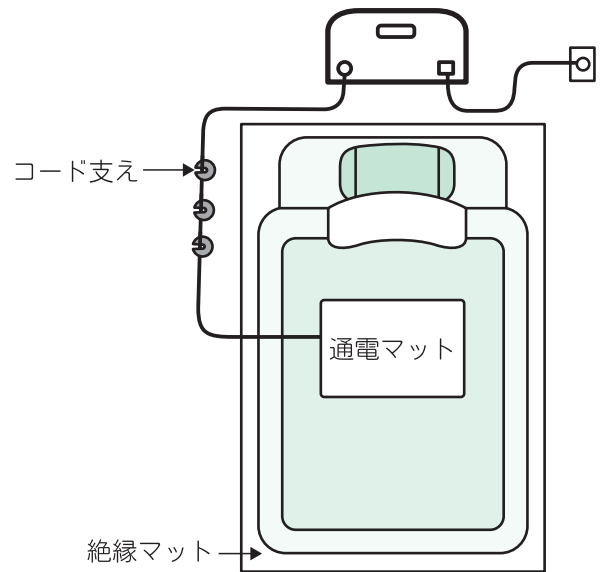


# 使用方法

- 注意： 1. 本体は安定した場所等に設置して、落下などに注意してください。  
2. 通電マットの高圧コードに足を引っ掛けないように注意してください。  
3. ご使用の前は、各設定スイッチ等が正常に作動することをお確かめください。

## A. 座布団、座椅子、布団をご使用の場合

1. いちばん下に絶縁マットを敷いてください。
2. 通電マットのコードは付属品のコード支えで、床との隙間を空けてください。

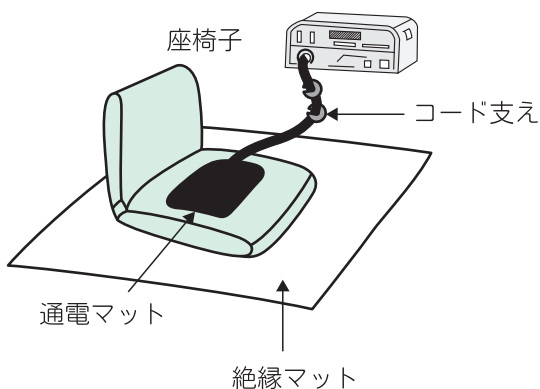

## B. 椅子やベッド等をご使用の場合

1. 椅子やベッドの足の下に絶縁ゴム板を敷いてください。  
(足のないベッドや足が絶縁ゴム板より大きなものでも同様です)
2. 絶縁マットは図のように足が乗るように敷いて、椅子の下には敷かないでください。  
椅子の足などで絶縁マットが傷みやすくなります。
3. 通電マットのコードは付属品のコード支えで、床との隙間を空けてください。

- 注意： 1. どんな形状の椅子やベッドでも絶縁ゴム板と絶縁マットを使用してください。  
ご使用の際は絶縁ゴム板を必ず4つ使用してください。  
2. 金属を含む椅子やベッドは使用しないでください。

